

Viktig information gällande objektglas för 5-partsdiff

Vi kommer att byta instrument för färgning av 5-partsdiff, bytet kommer att ske 1 juni.

Förändringen medför att **enbart** glas med klippta kanter kan användas, se bild nedan. Om andra glas skickas kommer de tyvärr att förolyckas då instrumentet inte kan ta emot dem.

5.2.3 Användbara objektglas

Objektglas som kan användas i detta instrument är följande.

Använd glas med skurna och rundade kanter.


Storlek: 24,70 till 26,30 mm x 74,70 till 76,30 mm

Tjocklek: 0,9 till 1,2 mm

Frostad ände: 15 till 20 mm

Använd de glas som Sysmex rekommenderar för optimal prestanda.

Kontakta din lokala auktoriserade Sysmex-representant för mer information.

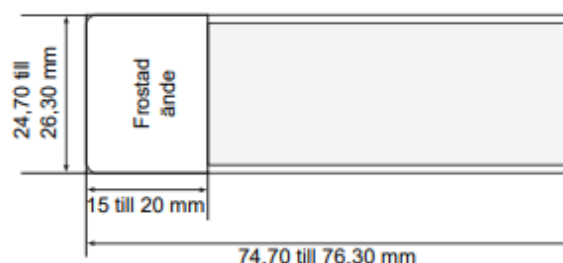

Information

Använd ett objektglas vars funktion har bekräftats.

Driftsfel, problem med bläcktryck eller skador på färgband kan förekomma med vissa objektglas.

Vid frågor kontakta SYNLAB på telefonnummer: 010-251 42 00.